

抗原キットを受け取られた 患者様へ

次のページのクリニテスト
COVID-19抗原迅速テスト
使用方法をご覧ください
ご自身で検査を行なって
ください。

クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト 使用方法




つながるを、止めない。(専用WEBサイト)
使用方法の動画をご覧ください。



1 滅菌綿棒を鼻腔に挿入


2~4cm

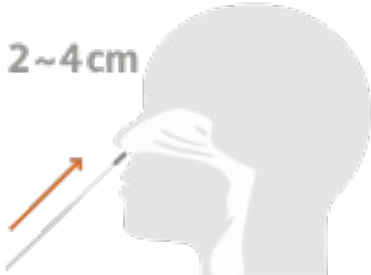

キット同梱の滅菌綿棒を使用し、片方の鼻腔に慎重に挿入します。抵抗を感じる場合は、それ以上挿入しないでください。


2 両方の鼻腔から検体を採取

5 times

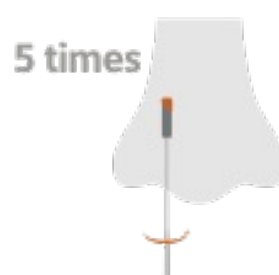

鼻腔の粘膜に沿って滅菌綿棒を5回ほど回転させ、粘液と細胞の両方を確実に採取します。

5 times

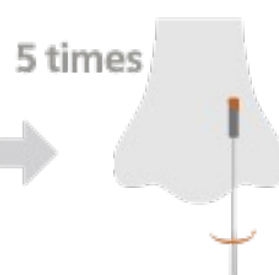

もう一方の鼻腔についても同じ滅菌綿棒を用いてこの手順を繰り返して、両方の鼻腔から十分に検体を採取します。




鼻腔から滅菌綿棒を引き出し、検体の前処理に進みます。

4 検体を緩衝液に浸す(検体の前処理)

6 times



1 min

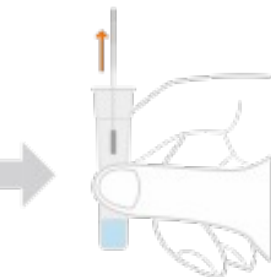

抽出チューブに滅菌綿棒を入れ、滅菌綿棒の先端を抽出チューブの底と側部に押し当てながら、6回以上回し、滅菌綿棒を入れたまま1分間待ちます。

1分後、抽出チューブを外側から数回押し、検体を絞るように滅菌綿棒を引き抜きます。

5 キャップ取り付け



抽出チューブ用キャップの広い部分を抽出チューブに取り付け、隙間がないことを確認します。

6 測定検体溶液を滴下

4 drops



測定カセット袋から測定カセットを取り出し、水平になる場所に置きます。抽出チューブを垂直に持ち、測定検体の溶液を4滴(およそ100 μ L)測定カセットに加えます。

7 結果確認



15分経過後、結果を確認します。

測定結果の判定方法



陽性



コントロールライン(C)と測定ライン(T)が2本とも現れた場合、結果は**陽性**です。

陰性



コントロールライン(C)のみ現れた場合、結果は**陰性**です。

無効



測定後コントロールライン(C)が現れない場合、結果は**無効**です。

各ラインの表示について

Q: Cのラインが薄い

A: 色が薄くてもラインが現れた場合は、操作が正しく行われたことを示します。

Q: Tのラインが薄い

A: 色が薄くてもラインが現れた場合は陽性とみなす必要があります。本品は定性測定のため、検体の濃度を評価することはできません。確定診断には臨床症状やPCR等、他の検査結果と合わせて医師が総合的に判断してください。

測定結果の判定のほか、
基本的事項、操作方法に
ついてのQ&Aはこちら



※無効となった原因として、検体採取及び操作手順が適切でなかったこと、または測定カセットの期限切れにより劣化していることが考えられます。新しい測定カセットにて再測定を実施ください。

重要な基本的注意

- 本品の判定が陰性であっても、SARS-COV-2感染を否定するものではありません。
- 検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針」を参照してください。
- 診断は厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本製品による検査結果のみで行わず、臨床症状も含めて総合的に判断してください。
- 鼻腔ぬぐい液を検体とした場合、鼻咽頭ぬぐい液に比べ検出感度が低い傾向が認められているため、検体の採取に際して留意してください。
- 検体採取及び取扱いについては、必要なバイオハザード対策を講じてください。



SARSコロナウイルス抗原キット
クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト

体外診断用医薬品
承認番号:30400EZ00015000

製造販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー
www.clinitest.siemens-healthineers.com/jp

220488 (2211CLBPDF)

仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

検査結果が陽性：**オンライン診療**します。



(2本赤い線あり)

検査結果が陰性：**お薬を希望される方のみ**
オンライン診療をします。




(赤い線が1本のみ)

オンライン診療が必要な患者様へ

- ① その後、デジスマ診察券というアプリを使用して抗原キットの結果をご報告いただきます。

デジスマ診察券アプリ
スマートフォンへの
ダウンロードを
お願いいたします。

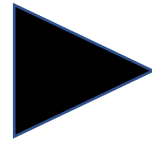

やまぐち内科医院のホームページからも
ダウンロードできます


- ② アプリをダウンロードされたら、お名前、住所などの情報の入力をお願いいたします。

* クレジットカード情報の入力は必須ではありません。

* 保険証は必ず撮影してください。

* ご家族で同時に検査される場合は、設定の家族設定から全ての方の情報入力をお願いいたします。

③ 次に、本人設定の保険証の下の  **公費等** の撮影ボタンで抗原キットの結果を撮影してください。

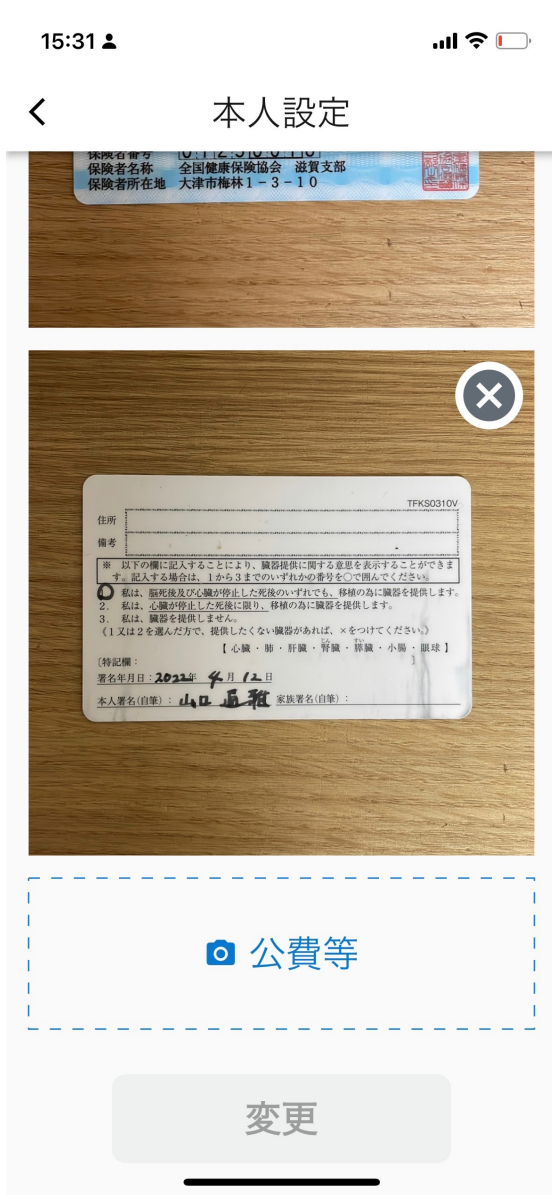

結果が
はっきり
わかるよう
に鮮明に
撮影して
ください。



- ④ 入力が終わりましたら、この画面が出てきますので、抗原キットをお渡しした時の説明用紙にある **やまぐち内科医院受付のQRコード** の読み取りをお願いいたします。




やまぐち内科医院受付 のQRコード



説明用紙の右側の
QRコードを読み取る

⑤ やまぐち内科医院のQRコードを読み込んでいただくとチェックイン画面に移動します。

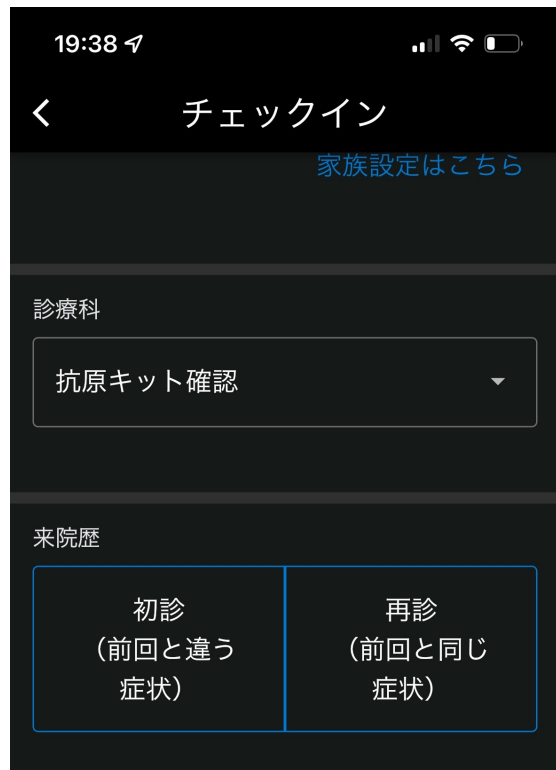


診療科は
【抗原キット確認】

来院歴は【初診】
を選択



画面下の
チェックイン
を押す

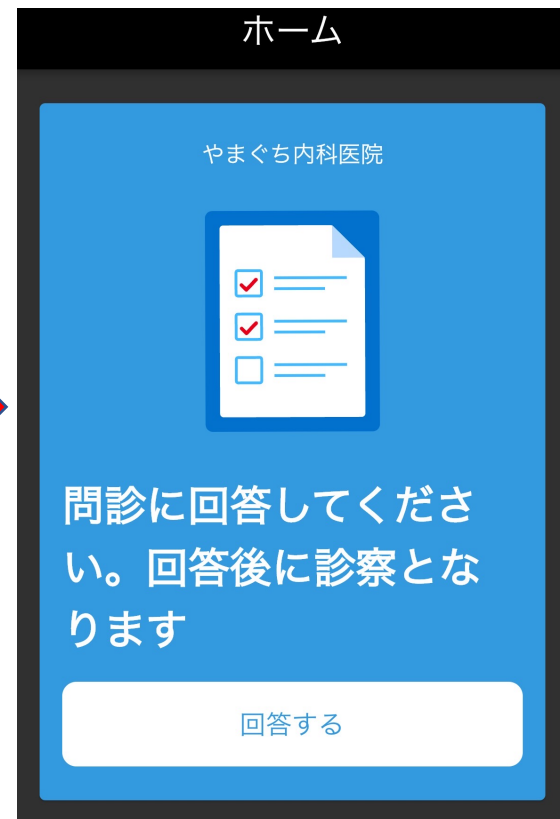


回答するを押す

- ⑥ 問診にすべて回答いただくと、やまぐち内科医院の電子カルテへご入力いただいた情報が全て送られます。この情報をもとに、オンライン診療を実施します。

院長から、ご登録頂きました携帯電話の番号へ連絡をします。
やまぐち内科医院携帯番号：080-8107-0476
から電話をしますので、電話番号の登録をお願いいたします。

⑦ LINE公式アカウント登録のおねがい

今後の連絡のため、やまぐち内科医院のホームページからLINEの友達追加でLINE登録をお願いいたします。

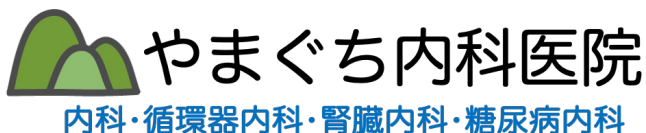

LINE 公式アカウント



ホームページにも登録ボタンがあります

診療時間の空き時間で、オンライン診療を実施しますので、時間が遅くなる場合もあります。携帯電話はつながるようにしてお待ちください。21時頃までには実施できるようにいたしますのでご了承ください。